

仕様変更のお知らせ

顆粒球エラスターゼキット

ファグノス・エラスターゼ Dip 電子添文及び包装仕様変更のお知らせ

謹啓 平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、ご愛顧いただいております顆粒球エラスターゼキット「ファグノス・エラスターゼ Dip」につきまして、電子添文及び包装仕様を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■変更内容及び変更理由

変更内容	変更理由
①電子添文の改訂（使用上又は取扱い上の注意）	使用した試薬類の廃棄に関する注意事項の追加
②個装箱リサイクルマーク（個装箱側面）	検査に使用した試薬類の適正な廃棄
③個装箱サイズの変更	個装箱サイズ適正化による輸送中の破損防止
④抽出液の配置変更	個装箱サイズ変更に伴う配置の見直し
⑤梱包箱サイズの変更	個装箱サイズ変更に伴う変更

この変更による操作方法、性能に変更はございません。

■変更品出荷予定時期

（メーカーコード:086）

製品名	一般名	包装	統一商品コード	変更ロット	出荷予定時期*
ファグノス・ エラスターゼDip	顆粒球 エラスターゼキット	10回用	086371735	AF00301	2025年8月下旬

※出荷予定時期は、弊社製品在庫状況により若干の差異が生じることがございますので予めご了承願います。
なお、仕様変更品については、一定期間個装箱上面に「仕様変更品」と表示いたします。

裏面もご確認ください。

製品のお問い合わせはコンタクトセンターへ

 **0120-19-8130**

受付時間

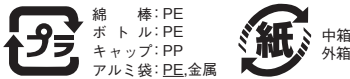
月～金曜日 **9:00～17:00**
(祝日及び弊社休業日を除く)



製造販売元

株式会社 **三和化学研究所**

SKK 名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

変更点	変更前	変更後
①電子添文の改訂 (使用上又は 取扱い上の注意)	■使用上又は取扱い上の注意■ 3. 廃棄上の注意 未使用の抽出液の残液を廃棄する場合には多量の水で流してください。 (第5版)	■使用上または取扱い上の注意■ 3. 廃棄上の注意 (1) 抽出液にはアジ化ナトリウムが含まれていますので、未使用の抽出液を廃棄する場合には多量の水で流して下さい。 (2) 使用済みの試験片、綿棒、抽出容器、及び検体に接触した器具等は感染性があるものとして、オートクレーブ(121℃、20分以上)か、次亜塩素酸ナトリウム溶液(有効塩素濃度1,000ppm以上)に1時間以上浸漬する等の処理後に廃棄して下さい。感染性医療廃棄物処理マニュアルがある施設はマニュアルに従って処理して下さい。 (3) 使用後の本キットを廃棄する場合は、廃棄物に関する法規、規定等に従って廃棄して下さい。 (第6版)
②包装箱 リサイクルマークの 見直し	 綿 棒: PE ボ ト ル: PE キャップ: PP アルミ袋: PE, 金属 紙 中箱 外箱	 紙 中箱 外箱
③個装箱サイズの変更 (縦×横×高さmm)	 125×240×60	 130×200×60
④抽出液の配置変更		
⑤梱包箱サイズの変更 (縦×横×高さmm)	497×390×262 梱包入数: 24キット	410×420×262 梱包入数: 24キット

以上